

Kanso[®]-lydprocessor

Hurtigveiledning

- ✓ Komme i gang
- ✓ Hurtigreferanse



CP950

Hear now. And always



Cochlear[®]

Om


Cochlear™ Kanso®-lydprosessor (modellnummer: CP950) fungerer sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til øret.



MERK

Mer informasjon og advarsler i *Bruerveiledning for Kanso-lydprosessor*.

Lydprosessor

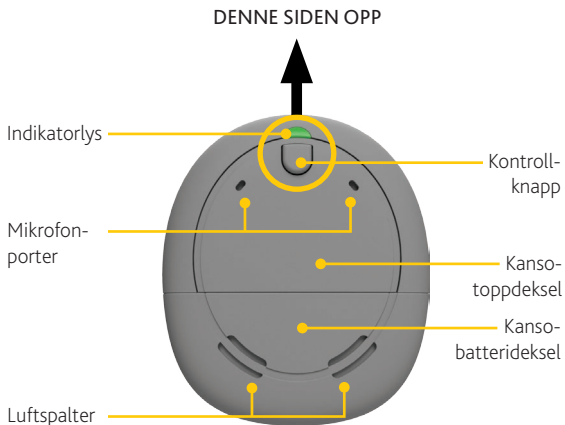

Låse og låse opp batteridekselet

Vri skruen med urviseren til den er vannrett, for å låse.



LÅST




For å låse opp vrir du til den står loddrett.




LÅST OPP


Bytte batterier

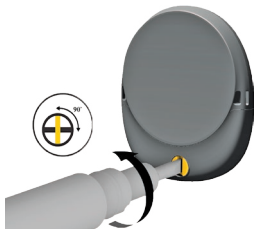


1. Vri låseskruen mot urviseren for å låse opp batteridekselet (vri den med urviseren for å låse).

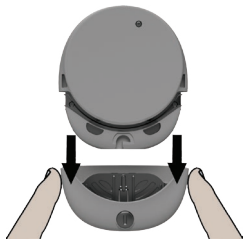

2. Skyv for å åpne.
Bruk fingrene på sidene til å trekke av dekselet.

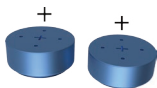


3. Sett inn to nye p675 høyeffekts luft/sink-engangs batterier med den flate siden vendt opp.

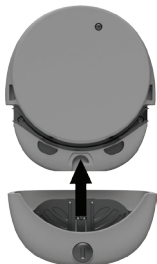

4. Sett batteridekselet på plass.
Vri låseskruen med klokken for å låse.

Feste prosessoren

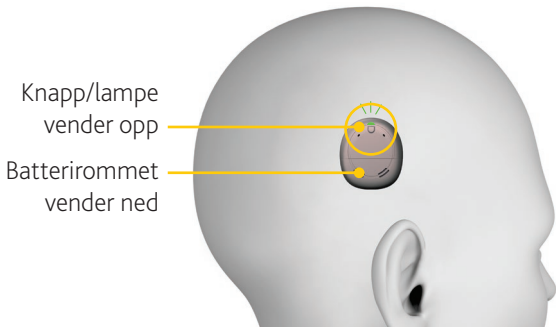


FORHOLDSREGLER

- Pass på å plassere lydprosessen riktig. Dette er viktig for å få best mulig ytelse og for at den ikke skal falle av implantatet.
- Hvis du har to implantater, må du passe på at du setter riktig prosessor på riktig implantat.


Feste en SoftWear-pad

Hvis du oplever ubehag, kan du feste en selvklebende Cochlear SoftWear™-pad til baksiden av prosessoren.

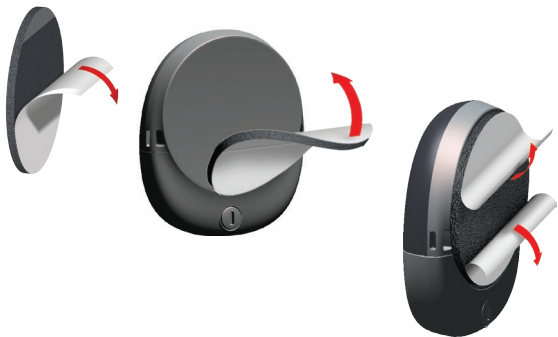

Sikre prosessoren

Du kan feste en Nucleus®-sikkerhetsnor for å redusere risikoen for å miste prosessoren.

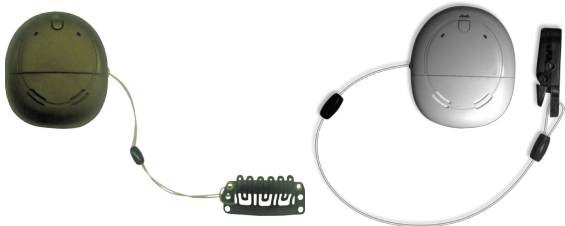


Ta tak i løkken og før den gjennom et festehull forfra og bakover. Før klipsen gjennom løkken, og stram til.

Slå av og på

Trykk på knappen for å slå på.

Slå av ved å trykke på og holde knappen nede til lampen lyser konstant oransje.

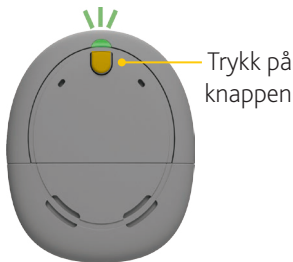


MERK

Lydprosessoren slår seg av automatisk når den har vært koblet fra implantatet i to minutter.

Skifte program

Trykk på knappen for å bytte programmet.

Antall pipetoner eller **grønne** blink (hvis satt opp av legen) indikerer programnummeret.

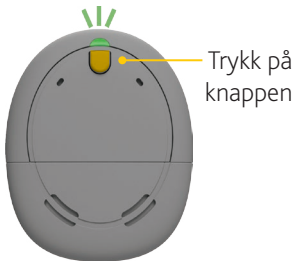

Streamme lyd


Trykk på og hold inne

knappen (to sekunder) for å streamme lydkilder.

Trykk og slipp på nytt hvis du vil bla til neste lydkilde.

Blå: streamme lyd.

Trykk på knappen for å avslutte streamingen.

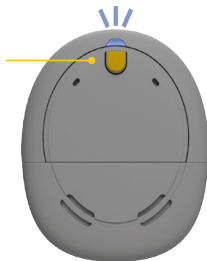

Hver gang du trykker på lydprosessorknappen, blar du gjennom de tilgjengelige lydkildene etter hverandre:

TRYKK**TELEPOLE AKTIVERT****INGEN TELEPOLE**

1

Telespole

Trådløst tilbehør 1

2

Trådløst tilbehør 1

Trådløst tilbehør 2

3

Trådløst tilbehør 2

Trådløst tilbehør 3





4...

Telespole ...




Trådløst tilbehør 1 ...

Lys

Daglig bruk

LYS	HVA DET BETYR
	Prosessoren blinker når den mottar lyd fra mikrofoner (bare barnemodus).
	Slås på og bytter programmer. Antall blink indikerer nummeret til det gjeldende programmet.
	Prosessoren blinker når den mottar lyd fra en lydkilde (bare barnemodus).
	Slår av prosessoren.

Alarmer

LYS	HVA DET BETYR
	Prosessoren er ikke på hodet (eller den er koblet til feil implantat).
	Prosessorbatteriene er nesten utladet. Bytt batteriene.
	Feil. Ta kontakt med klinikkpersonalet. Lyser til problemet er løst.

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D701289 ISS2

Norwegian translation of 552818 ISS2 JUN17