


## Fordeler ved bruk av Cochlear Wireless Mini Microphone

Du hører bedre på avstand og i støyende omgivelser, f.eks.:



- når du er på restaurant
- i møter
- når du trener i gruppe på treningssenteret
- på skoler og i klasserom
- når du reiser med bil, buss eller tog

### Slik gjør du:

Gi mikrofonen til vedkommende du vil høre på og be vedkommende plassere den nær munnen ved å feste den vertikalt til tøyet med klemmen på baksiden. Deretter aktiverer du strømming på din Baha lydprosessor.

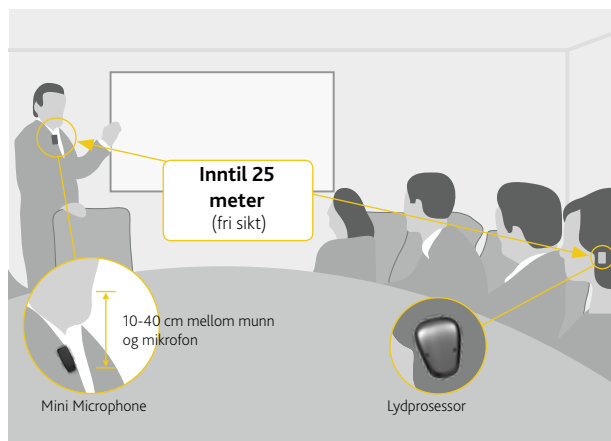

## Produktoversikt

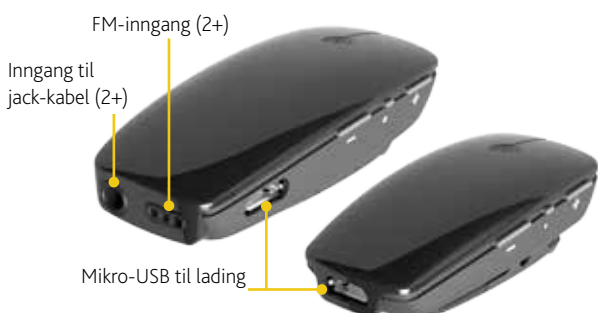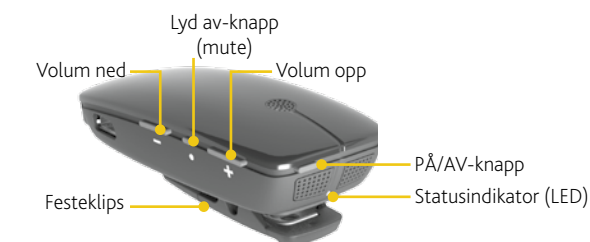

## Kom i gang

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er parett med mikrofonen din. Det er ikke nødvendig å pare forhåndsparate lydprosessorer på nytt.

Hvis lydprosessoren din ikke er forhåndsparett, finner du forklaring nedenfor på hvordan du enkelt parer den med mikrofonen din.

**Tips!** Pass på at lydprosessoren din er justert til et behagelig nivå før du endrer innstillingene med volumkontrollen på mikrofonen.

### Lade batteriet

Lad batteriet i minst 3 timer før du bruker mikrofonen første gang, selv om batteriindikatoren indikerer at det er fulladet.

Laderen kan være tilkoblet over natten, batteriet kan ikke overlades.

**Merk:** Mikrofonen vil i snitt fungere i inntil 10 timer mellom hver lading. Batteriets levetid kan variere med bruken.

## Hør TV eller radio bedre

### Slik gjør du:

Plasser mikrofonen ved TV-høytaleren eller radioen. Det er ikke nødvendig å plugge den i en hodetelefonutgang.



## Pare med lydprosessoren

Du kan pare inntil tre Cochlear strømmingsenheter med Cochlear lydprosessor. Velg en egen kanal for hver enhet som pares med lydprosessoren.

- A** Slå av Cochlear lydprosessor.
- B** Slå på mikrofonen.



- C** Trykk på paringsknappen (to ganger for kanal 2, tre ganger for kanal 3) med spissen på en penn eller lignende. Statusindikatoren blinker gult, og enheten er i paringsmodus i 20 sekunder.



- D** Antall blink i indikatoren i hver sekvens tilsvarer kanalen mikrofonen pares med (to blink – kanal 2, tre blink – kanal 3).



- E** Slå på lydprosessoren mens paringsmodus er aktivert.

- F** Vellykket paring indikeres enten ved at det avspilles en hørbar melodi i lydprosessoren, eller med et blinkende lys på lydprosessoren (avhengig av lydprosessorstype).

## Hvordan bruke din Cochlear Wireless Mini Microphone

### Starte strømming

1. Slå på mikrofonen og lydprosessoren.
2. Trykk på og hold inne knappen for trådløs strømming/program på lydprosessoren i ca. tre sekunder.

Når strømming er aktivert, etterfølges en hørbar melodi eller et blinkende lys (avhengig av type lydprosessor) av strømmet lyd via mikrofonen.

### Begynn å strømme fra et annet og/eller tredje Cochlear trådløst tilbehør

Hvis lydprosessoren er parett med mer enn en strømmingsenhet, trykker du på og holder inne knappen for trådløs strømming/program én eller to ganger til for å få tilgang til Cochlear strømmingsenhet 2 eller 3.

### Stoppe strømming

Trykk på knappen for trådløs strømming/program på lydprosessoren din. Dette stiller lydprosessoren tilbake til sist brukte program.

### Lyd av

1. Trykk på lyd av-knappen for å slå av lyden. Lyd av-indikatoren blinker gult når lyden er slått av.
2. Trykk på lyd av-knappen en gang til for å slå på lyden.

**Merk:** Lyden slås på hvis du starter mikrofonen på nytt.



## Ytterligere funksjoner ved Mini Microphone 2+

Mini Microphone 2+ muliggjør også utvidet tilkobling til lydilder.

### Telespole

Fra den innebygde telespolen, lydnett fra et teleslyngesystem (finnes på enkelte teatre, skoler, kirker osv.).



### FM

Fra en ekstern FM-mottaker tilkoblet via FM-inngangen. For å bruke denne modusen, setter du en europin DAI eller FM-mottaker i FM-inngangen.



### Inngang til jack-kabel

Fra en ekstern lydkilde (smarttelefon, nettbrett, laptop, TV osv.) tilkoblet til inngang til jack-kabel.

For å bruke denne modusen plugges den medfølgende jack-kabelen i inngangen og den andre enden av jack-kabelen i lydutgangen på den eksterne lydilden.

### Strøm lyd til din lydprosessor

#### Slik gjør du:

Plugg den ene enden av den medfølgende jack-kabelen i inngangen på mikrofonen og den andre enden i audio-utgangen på lydenheten, f.eks. PC, MP3-spiller eller lydanlegg.



### Endre modus

Trykk én gang på modusknappen for å se gjeldende bruksmodus. Tilsvarende moduslampe på baksiden av mikrofonen lyser.

For å endre bruksmodus trykker du på modusknappen helt til ønsket modus er valgt.

Merk:

- Inngang til jack-kabel - og FM-modus kan bare velges dersom det er plagget en kabel eller FM-mottaker i mikrofonen.
- Mikrofonen går automatisk over i inngangsmodus når du setter inn en mini-jack-plugg.
- Mikrofonen går automatisk over i FM-modus når du kobler til en FM- eller DAI-mottaker.




Cochlears trådløse tilbehør er kompatibelt med utvalgte Cochlear lydprosessorer. Se [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) for fullstendig informasjon om kompatibilitet.

Alle produkter finnes ikke på alle markeder. Produkttilgjengeligheten er avhengig av godkjenning på de respektive markedene.


## Hjelp

For fullstendig informasjon om Cochlear Wireless Mini Microphone, se bruksanvisningen.

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor, se bruksanvisningen del A.

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

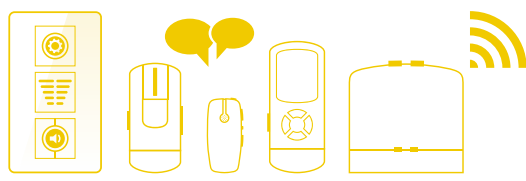

Gå inn på [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) for å få vite mer om vårt komplette utvalg av apper og trådløst tilbehør.