

## Tilkoblingsveiledning (for Android™ PI285539 versjon 1.0)

Denne veiledningen viser deg hvordan du kobler Cochlear™ Nucleus 7-lydprosessor(er) til en Nucleus Smart-app på en Android-smarttelefon\*, slik at du kan bruke appen til å kontrollere og overvåke lydprosessor(en) din(e).

**MERK**  
For å bruke Android-versjon av appen må lydprosessoren din ha den nyeste fastvaren installert. Ta kontakt med klinikkpersonalet.

## Koble til prosessoren(e).

### MERKNADER


- Hvis du har lydprosessor(er) som allerede er tilkoblet, må du koble dem fra først. Se side 4 for instruksjoner om frakobling.
- Radiointerferens: Når du prøver å koble sammen en lydprosessor med en app, kan det være at du opplever forstyrrelse fra enkelte enheter (f.eks. mikrobølgeovner, trådløse rutere og TV Streamer-enheter). Hvis dette skjer, beveger du deg bort fra apparatet, før du prøver igjen.

- 1 Ha prosessoren(e) din(e) klare.
- 2 Slå på Bluetooth på Android-smarttelefonen din.
- 3 Kjør **Nucleus Smart-appen**.
- 4 Sveip gjennom **velkomstskjermene**.
- 5 Opprett din Cochlear-konto, **eller** logg inn hvis du har en konto allerede.


- 6 Skjermbildet **Koble til prosessoren(e)** vises. Trykk på **Fortsett**.



- 7 I popup-vinduet **Posisjon** trykker du på **OK**.

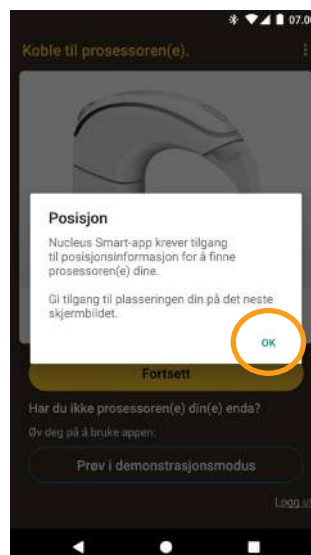

- 8 I popup-vinduet **Tillat** Nucleus Smart trykker du på **TILLAT**.

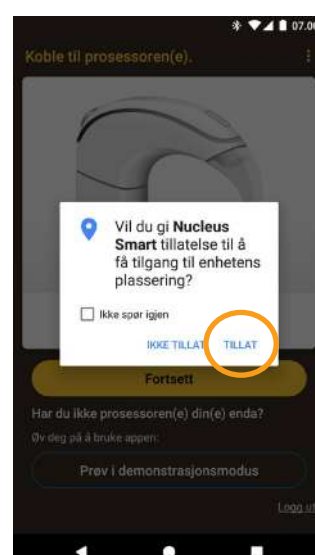


\*Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du besøke [www.cochlear.com/compatibility](http://www.cochlear.com/compatibility). ... FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ...

- 9 Skjermbildet **Finn prosessoren(e) din(e)** vises. Slå lydprosessoren(e) AV og deretter PÅ. Hvis du har to prosessorer, gjør du dette på begge to etter hverandre. Trykk på **Fortsett**.



- 10 Når prosessoren(e) din(e) vises, **trykker du** én gang for å starte tilkoblingen.

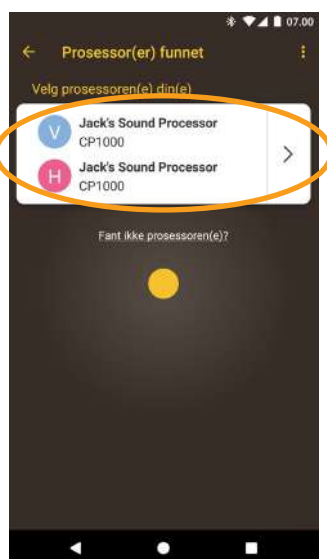


- 11 Skjermbildet **Tilkoblede prosessorer** vises når sammenkoblingen er fullført. Trykk på **Fortsett**.



- 12 Når skjermbildet **Verifiser prosessor** vises:  
 A. Fjern prosessoren din, og trykk på prosessorknappen.  
 B. Plasser prosessoren din på hodet ditt, og trykk på **Fortsett**.



- 13 Trykk på et alternativ på skjermbildet **Lydprosessor(er)**, og hvis du blir bedt om det, angir du brukerdetaljer.

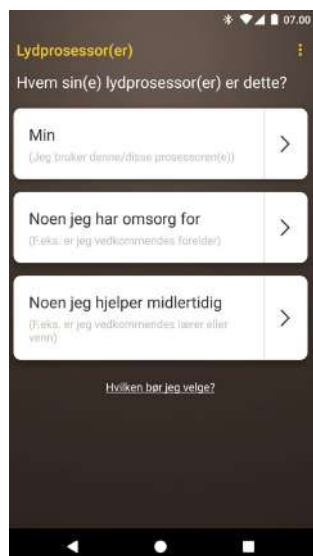

- 14 Skjermbildet **Aktiver datasynkronisering** vises. Hvis du vil bruke denne funksjonen, trykker du på **Aktiver**.



- 15 Hvis skjermbildet **Lydoverføring** vises, ser du trinnene på **neste side**, eller hvis skjermbildet **Oppsett er fullført** vises, trykker du på **Fortsett**.



For å koble sammen ytterligere kompatible enheter må du først deaktivere Bluetooth på enhetene som allerede er koblet.

# Smarttelefoner med lydoverføring for høreapparater

Hvis smarttelefonen din støtter lydoverføring til høreapparater, kan du motta lyd fra telefonen din rett til prosessoren din. Gjør som følger for å sette opp lydoverføring:

- 1 Når skjermbildet **Lydoverføring** vises, trykker du på **Aktiver**. Lydprosessor(e) din(e) vil slås av for et øyeblikk.
- 2 Hvis en annen / andre lydprosessor(er) allerede er koblet sammen eller overfører lyd til smarttelefonen din, må du **glemme** dem nå.
- 3 Vent mens skjermbildet **Kobler til prosessoren** vises.



Følg instruksjonene på skjermen for å **glemme** prosessor(e), og deretter trykker du på **tilbake-knappen** for å gå tilbake til Nucleus Smart-app.



- 4 Hvis **Trykkelyder** er aktivert på smarttelefonen, vil skjermbildet **Trykkelyder** vises. Følg instruksjonene på skjermen for å **deaktivere Trykkelyder**. Trykk deretter på **tilbake-knappen** for å gå tilbake til Nucleus Smart-appen.
- 5 Når skjermbildet **Oppsett er fullført** vises, trykker du på **Fortsett**.
- 6 Du kan bruke **Nucleus Smart-appen!** Se *brukerveiledningen for Nucleus Smart-appen* for mer informasjon.



For å koble sammen ytterligere compatible enheter må du først deaktivere Bluetooth på enhetene som allerede er koblet.


# Koble fra prosessoren(e)

Hvis du bytter ut lydprosessor(er), f.eks. når du får en ny lydprosessor fra reparasjonsenteret, må du gjøre følgende:


- Koble fra de(n) gamle lydprosessor(en).
- Koble til de(n) nye lydprosessor(en).

Gjør som følger for å koble fra prosessoren(e):


1 Åpne appens meny.

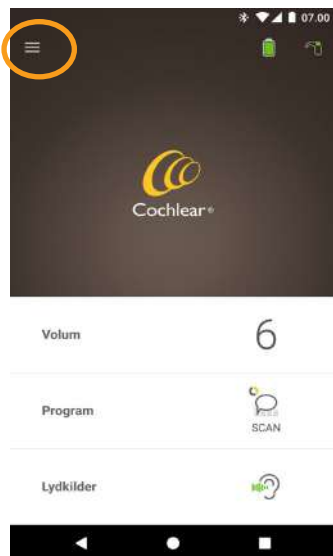


2 Trykk på Innstillinger.

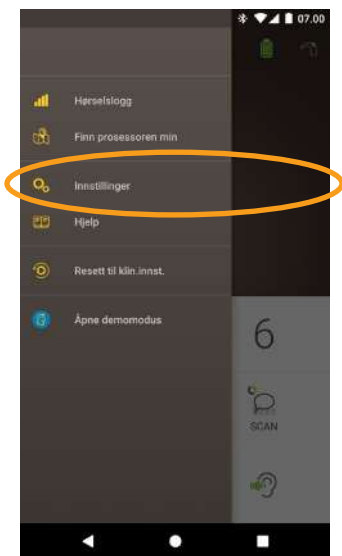


3 Trykk Processorinnstillinger.

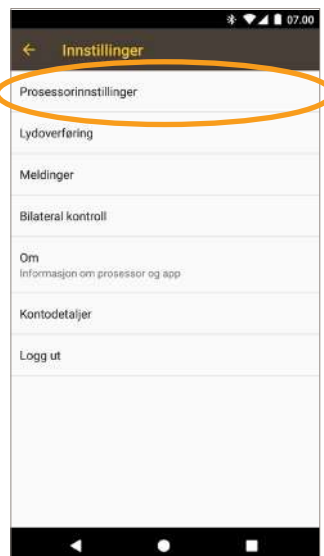


4 Trykk på Koble fra prosessoren(e) din(e).

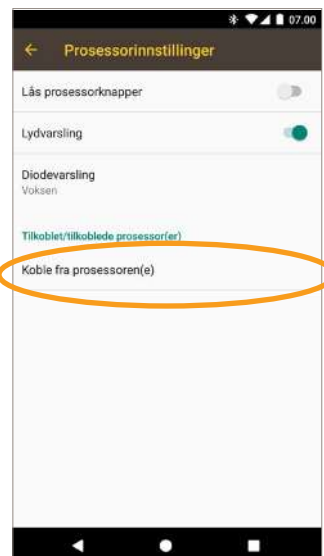

5 Trykk på JA.

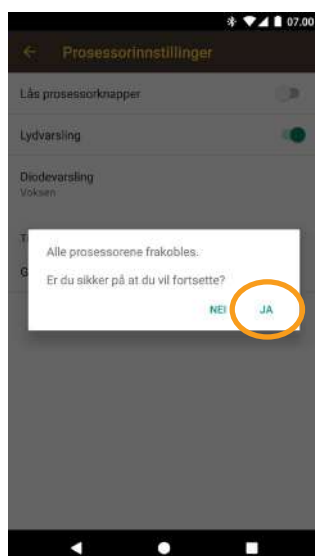

6 Hvis streaming er aktivert for din(e) prosessor(er), vil du bli spurt om å **deaktivere lydoverføring**.

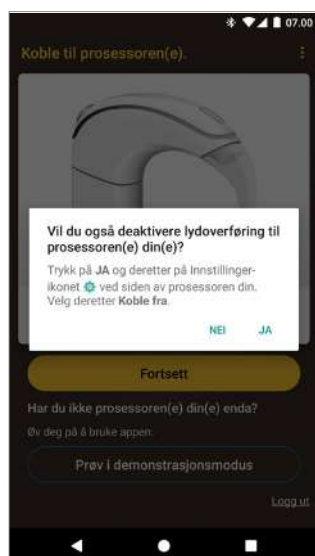


- A. Trykk på **JA**, og følg instruksjonene for å glemme din(e) prosessor(er).
- B. Trykk på **tilbake-knappen** for å gå tilbake til Nucleus Smart-app.




# Sjekk lydoverføringsstatus

For å sjekke din lydoverføringsstatus:


1 Åpne appens meny.

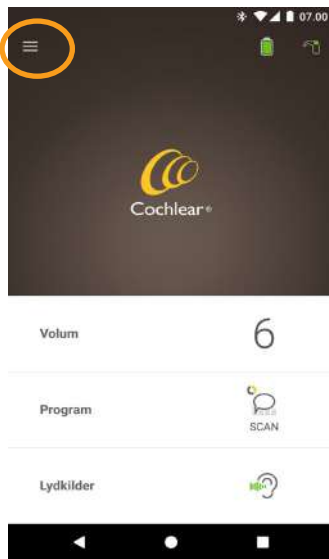

2 Trykk på Innstillinger.

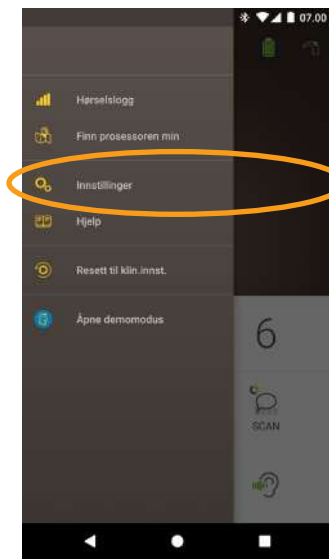

3 Trykk på Lydoverføring.

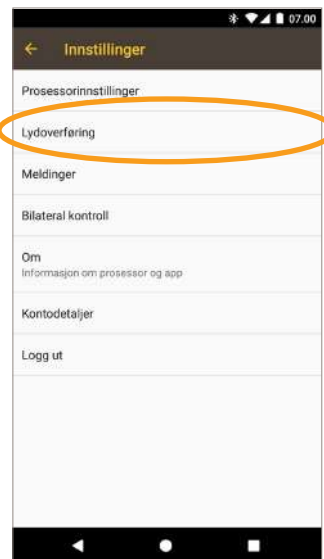

4 Hvis lydoverføringen ikke er **aktivert**, kan du se informasjonen på skjermen og trykke på de tilgjengelige koblingene.

- Se *brukerveiledningen for Nucleus Smart-appen* for mer informasjon om appen.
- Se *brukerveiledningen for Nucleus 7-lydprosessoren* for mer informasjon om lydprosessoren.
- Besøk oss på Internett for tips, instruksjonsvideoer og mye mer: [www.cochlear.com/](http://www.cochlear.com/)

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352  
**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555  
Fax: +61 2 9428 6352  
**CEC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 11 542 7770  
**Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025  
[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited. Android er et varemerke for Google Inc.