

# Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

## Cochlear™ Wireless Phone Clip




### Fordeler ved bruk av Cochlear Wireless Phone Clip

- Nyt håndfri telefoning direkte til din Baha lydprosessor
- Hør ditt Bluetooth®-aktiverte navigasjonssystem direkte i din Baha lydprosessor.
- Juster din Baha lydprosessor diskret ved å bruke Phone Clip som fjernkontroll.
- Strøm musikk fra en Bluetooth®-aktivert enhet.

*Phone Clip kan enkelt festes på klærne. Den innebygde mikrofonen fanger opp og overfører stemmen din, selv om telefonen din er flere meter unna.*



### Produktoversikt

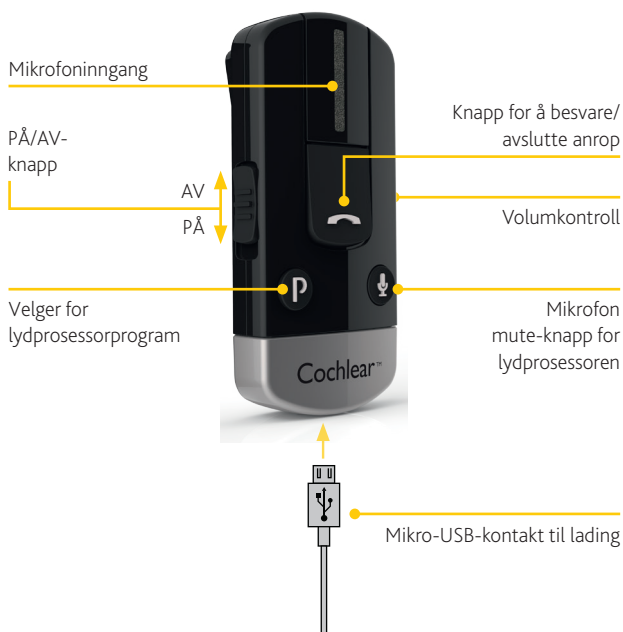

### Komme i gang

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er parett med din Phone Clip. Det er ikke nødvendig å pare forhåndsparede lydprosessorer på nytt. Hvis lydprosessoren din ikke er forhåndsparett, finner du forklaring på hvordan du enkelt parer den med din Phone Clip på siste side i denne veiledningen.

**Tips!** Pass på at lydprosessoren din er justert til et behagelig nivå før du endrer innstillingene med volumkontrollen på Phone Clip.

#### Lade batteriet

Plugg den ene enden av den medfølgende mikro-USB-ladekabelen i Phone Clip og den andre i en datamaskin, eller i en stikkontakt via den medfølgende adapteren.

Når den røde LED-indikatoren øverst på Phone Clip blir grønn og blinker rødt hvert annet sekund, er ladingen fullført.

Første gang du lader din Phone Clip må du la den lades i minst 3 timer, selv om indikatorlampen viser at den er fulladet. Batteriet kan ikke overlades.

**Merk:** Phone Clip gir 6 timers samtaletid eller 80 timers standby-tid når den er fulladet.

# Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

## Cochlear™ Wireless Phone Clip



### Lysindikatorer (LED)

Lysindikatorerne øverst på Phone Clip gir informasjon om enhetens status.

Blinking	Betydning
	Vanlig bruk (grønt)
	Lavt batterinivå (gult)
	Lader (rødt)
	Fulladet – fortsatt tilkoblet lader, (rødt/grønt)
	Klar til paring med lydprosessor (gult)
	Klar til paring med Bluetooth-enhet (blått)
	Bluetooth-samtale i gang (blått)

### Koble til med mobiltelefonen din

For å motta anrop eller ringe ut med Phone Clip, må Bluetooth®-funksjonaliteten være aktivert i mobiltelefonen din. Telefonen kan be deg bekrefte at du vil koble til Phone Clip etter vellykket paring.

Hvis du må koble til manuelt, må du finne en liste over "Parede enheter" i telefonens Bluetooth®-meny. I den listen merker du "Høreapparattelefon" og velger "Koble til".

Nå er du klar til å bruke din Phone Clip.

Du kan også aktivere "Automatisk fornyet tilkobling" på enkelte telefoner. Se hvordan du gjør dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen din.

**Tips!** I de fleste tilfeller vil et hodetelefonssymbol på mobiltelefonens hovedskjerm bekrefte at tilkoblingen er vellykket.

### Hvordan bruke Phone Clip

#### Håndtere samtaler med knappen for å besvare/avslutte anrop



- Innkommende anrop:**  
Trykk en gang for å besvare et anrop.  
Trykk to ganger for å avise et anrop.
- Under en samtale:**  
Trykk en gang for å overføre en samtale startet med din telefon til Phone Clip.  
For å sette en samtale på vent, trykker du inn og holder knappen inne i 2 sekunder.
- For å ringe:**  
Dobbeltklikk for å ringe siste brukte nummer på nytt.  
Trykk inn knappen og hold den inne i 2 sekunder for å aktivere taleoppringning.

#### Bruke Phone Clip som fjernkontroll



Når du ikke snakker i telefonen, kan Phone Clip også brukes som en enkel fjernkontroll for lydprosessor(en) din(e).

- Juster lydprosessorens lydstyrke.
- Trykk en gang for å slå lydprosessorens mikrofoner av og på.
- Trykk en eller flere ganger for å veksle mellom lydprosessorens programmer.

# Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

## Cochlear™ Wireless Phone Clip



### Pare med din Baha lydprosessor

- A** Slå av din Baha lydprosessor ved å åpne batteridekselet.



- B** Slå på Phone Clip og ta av den sølvfargede hetten.



- C** Trykk én gang på den hvite paringsknappen på Phone Clip med spissen på en penn eller liknende.



- D** LED-indikatoren blinker gult annethvert sekund, og Phone Clip er nå i paringsmodus i 20 sekunder.



- E** Mens paringsmodus er aktivert, slår du på lydprosessoren ved å lukke batteridekselet.



- F** Vellykket paring indikeres av en hørbar melodi i lydprosessoren.



# Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer

## Cochlear™ Wireless Phone Clip



### Pare med mobiltelefonen din

- A** Slå på Phone Clip og ta av den sølvfargede hetten.
- B** Påse at mobiltelefonens Bluetooth®-funksjonalitet er slått på. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller se anvisninger på [www.jabra.com](http://www.jabra.com).



- C** Trykk en gang på den blå Bluetooth® paringsknappen på Phone Clip for å aktivere paringsmodus i 2 minutter. LED-indikatoren lyser blått under paringen.



- D** Søk etter nye Bluetooth®-enheter på mobiltelefonen din og velg "Høreapparattelefon" i listen.
- E** Hvis mobiltelefonen din ber om et passord, skriver du "0000" (fire nuller).
- F** Nå er din Phone Clip paret med mobiltelefonen din. Hvis mobiltelefonen spør hvilken Bluetooth®-tjeneste du vil aktivere, velger du "Hodetelefon".


### Hjelp

For fullstendig informasjon om Cochlear Wireless Phone Clip, se bruksanvisningen.

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor, se bruksanvisningen del A.

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

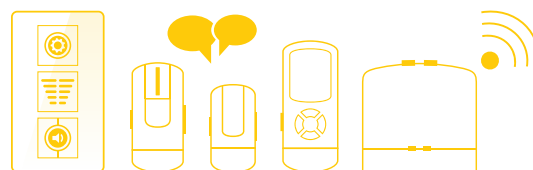

Gå inn på [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com) for å få vite mer om vårt komplette utvalg av apper og trådløst tilbehør.