

Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer


Cochlear™ Wireless TV Streamer




Fordeler ved bruk av Cochlear™ Wireless TV Streamer

Cochlear Wireless TV Streamer vil gi deg strømmet lyd av høy kvalitet fra TV, stereoanlegg, PC eller tilsvarende utstyr direkte til lydprosessorene dine.

Merk: TV Streamer kan pares med flere Baha lydprosessorer for bilateral bruk, og for at flere brukere skal kunne lytte til samme strømmere.

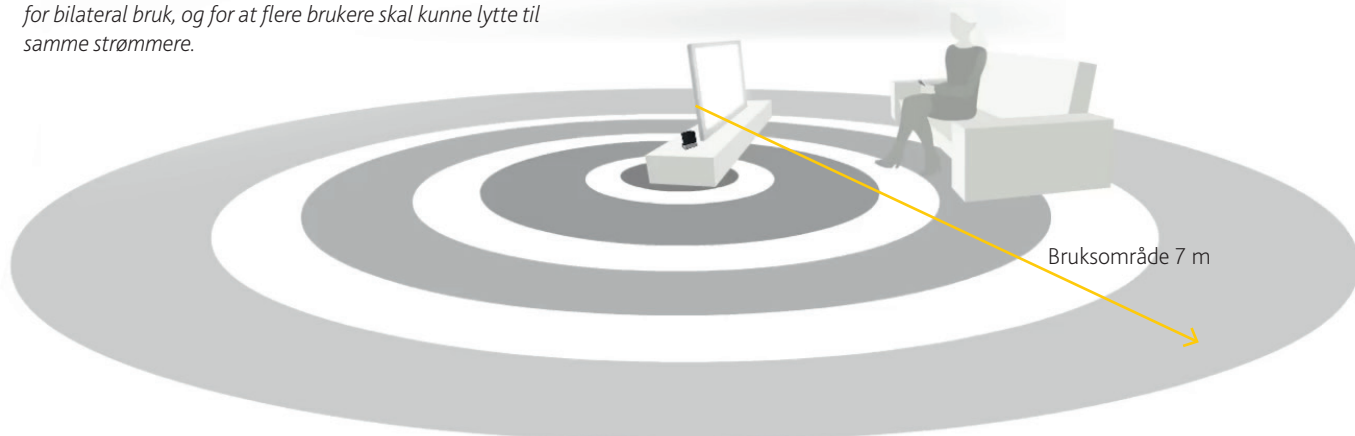

Produktoversikt

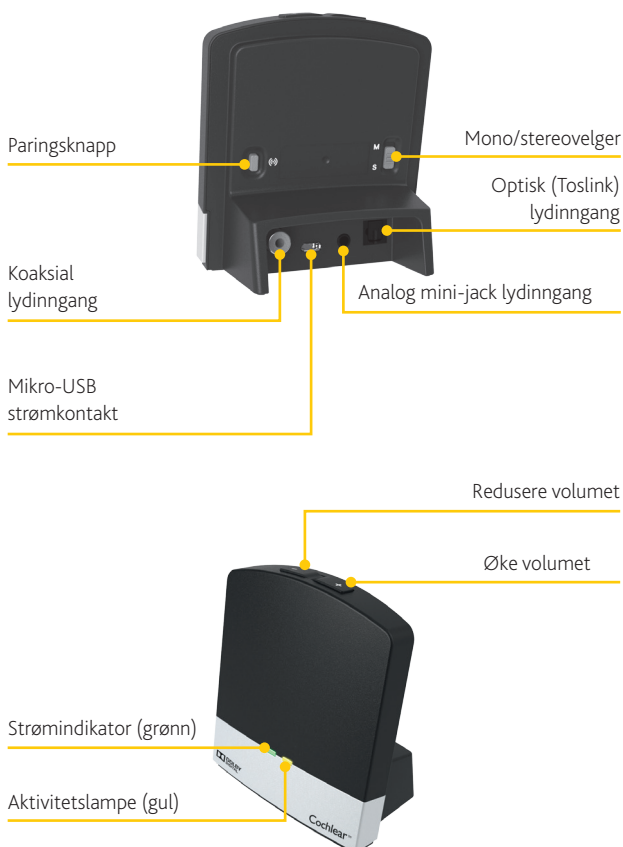

Komme i gang

Kontroller med audiografen om din lydprosessor er paret med din TV Streamer. Det er ikke nødvendig å pare forhåndsparate lydprosessorer på nytt. Hvis din lydprosessor ikke er paret, finner du forklaring på hvordan du enkelt parer den med din TV Streamer på siste side i denne veiledningen.

TV Streamer støtter både analoge og digitale lydinningangssignaler. TV Streamer kan installeres på flere måter, slik det er beskrevet på de neste sidene, avhengig av TV-apparat, stereoanlegg, datamaskin eller annen lydenhet.

For alle installasjoner må man:

- Plugge strømledningen i mikro-USB-inngangen på TV Streamer.
- Plugge den andre enden av strømledningen i en stikkontakt. Koble TV Streamer til lydkilden din ved hjelp av ett av de følgende 5 installasjonsalternativene.

Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer


Cochlear™ Wireless TV Streamer



Bruke Cochlear Wireless TV Streamer


Koble TV Streamer til en analog lydkilde (f.eks. TV eller stereoanlegg).

- A** Sett stereo mini-jack-pluggen på lydledningen i stereo mini-jack-inngangen på TV Streamer.
- B** Plugg den andre enden av lydledningen i "AUDIO OUT"-utgangene på lydkilden. "AUDIO OUT" er vanligvis merket "L - R" for venstre og høyre, og vanligvis plassert på baksiden av lydkilden.

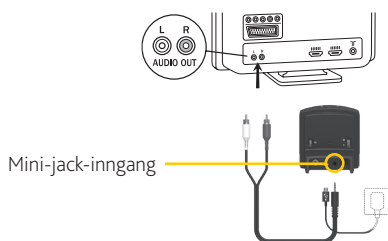


Koble TV Streamer til en analog lydkilde med mini-jack-adaprer for hodetelefon.

- A** Sett stereo mini-jack-pluggen på lydledningen i stereo mini-jack-inngangen på TV Streamer.
- B** Koble stereo mini-jack-adapteren til de røde og hvite pluggene i den andre enden av lydledningen.
- C** Plugg stereo mini-jack-adapteren i lydkildens "HODETELEFON"-utgang.

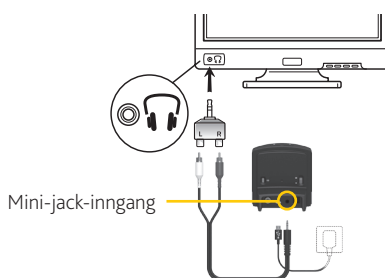


Koble TV Streamer til en analog lydkilde med scart-adaprer.

- A** Sett stereo mini-jack-pluggen på lydledningen i stereo mini-jack-inngangen på TV Streamer.
- B** Koble scart-adapteren til de røde og hvite pluggene i den andre enden av lydledningen.
- C** Plugg scart-adapteren i lydkildens scart-kontakt.

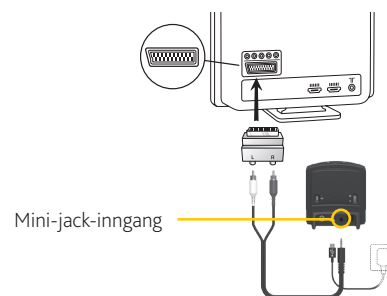


Koble TV Streamer til en digital lydkilde via den optiske (Toslink) lydinngangen.

- A** Sett en av pluggene på den optiske lydledningen i den optiske lydinngangskontakten på TV Streamer.
- Merk:** De fleste optiske ledninger leveres med en liten beskyttelseshette for å beskytte enden av pluggen. Ta av denne beskyttelseshetten før ledningen plugges inn.
- B** Plugg den andre enden av den optiske lydledningen i "Digital Lyd Ut/Optisk"-utgangen på lydkilden din.

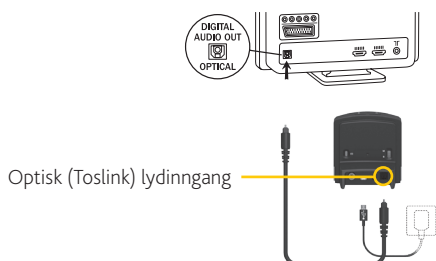

Koble TV Streamer til en digital lydkilde via den koaksiale lydinngangen.

- A** Sett en av pluggene på den koaksiale lydledningen i den koaksiale lydinngangskontakten på TV Streamer.
- B** Plugg den andre enden av den koaksiale lydledningen i "Digital Lyd Ut/Koaksial"-utgangen på lydkilden din.

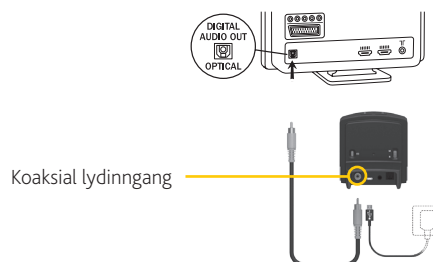


Hurtigveiledning for brukere av Baha® 5 lydprosessorer Cochlear™ Wireless TV Streamer



Bruke Cochlear Wireless TV Streamer

Pare med din Baha lydprosessor


- A** Påse at TV Streamer er plugget i en stikkontakt og at den grønne strømindikatorene lyser.

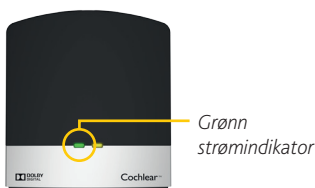

- B** Slå av lydprosessoren.
C Trykk en gang på paringsknappen på TV Streamer for å aktivere paringsmodus.



- D** Du kan se at paringsmodus er aktivert når kanalindikatorene blinker. Paringsmodus er aktiv i 20 sekunder.

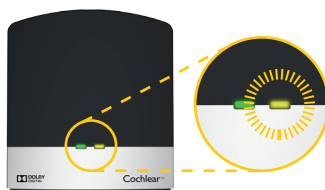

- E** Når kanalindikatorene blinker, slår du på lydprosessoren.

Merk: Vellykket paring indikeres av en hørbar melodi i lydprosessor(e) din(e).
Nå er du klar til å bruke TV Streamer.

Pare flere TV Streamers til en lydprosessor

Det er mulig å pare inntil tre TV Streamer-enheter med lydprosessor(e) din(e). For å pare en andre eller tredje TV Streamer, følg punktene **A** og **B** til venstre for denne spalten.

- C** Trykk deretter **to** eller **tre** ganger på paringsknappen på den andre TV Streameren.
D Den gule indikatorlampen foran på TV Streamer blinker nå to eller tre ganger hvert annet sekund for å indikere at den er klar til å bli paret på lydprosessorens kanal 2 eller 3.

Knappetrykk for paring	LED-blinkemønster	Kanal
1	1 1 1 1	1
2	1 2 1 2 1 2	2
3	1 2 3 1 2 3 1 2 3	3

- E** Fullfør paringsprosessen ved å slå på lydprosessor(e).

Aktivere strømming

Etter installering kan du lytte til strømmet lyd fra TV Streamer ved å følge disse enkle stegene:

Slå først på TV, lydanlegg eller datamaskin, deretter trykker du på og holder inne knappen (langt trykk) på lydprosessor(e) din(e).

Dette må eventuelt gjøres enkeltvis for hver prosessor for å kunne høre strømmet lyd i begge ører.

Slutte å lytte til strømmet lyd:

Trykk kort på og slipp knappen på lydprosessor(e).


Hjelp

For fullstendig informasjon om Cochlear Wireless TV Streamer, se bruksanvisningen.

For fullstendig informasjon om Cochlear Baha lydprosessor, se bruksanvisningen del A.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

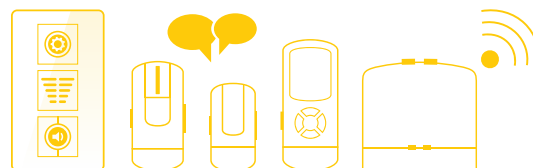

Gå inn på www.cochlear.com for å få vite mer om vårt komplette utvalg av apper og trådløst tilbehør.