



Funksjoner på din TV Streamer

- Få lydoverføring av høy kvalitet direkte til lydprosessorer fra TV-en, stereoanlegget, datamaskinen eller lignende enheter.
- Enheten støtter både analog og digital inngang.
- Hvis du går ut av rommet og kommer tilbake innen fem minutter, kobler enheten seg automatisk til igjen.
- Installer og glem den – bare klikk på en knapp for å se på TV.

TV Streamer plugges inn i en vanlig veggstikkontakt og direkte inn i lydenheten din. TV Streamer overfører stereolyd gjennom lydprosessorer fra opptil 7 meters avstand.

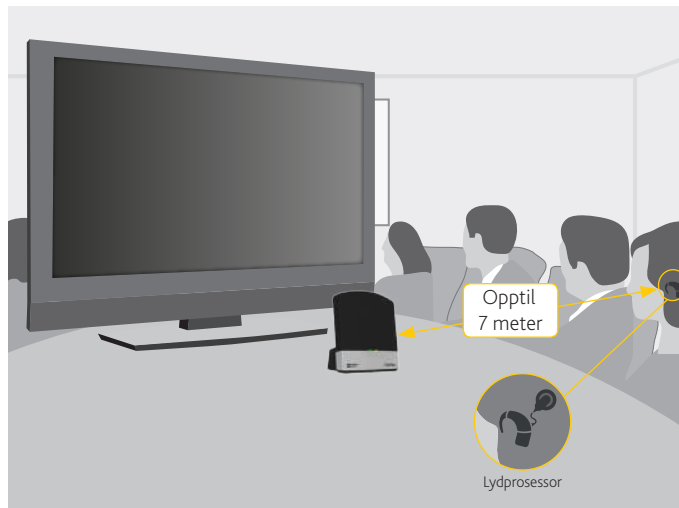

Produktoversikt

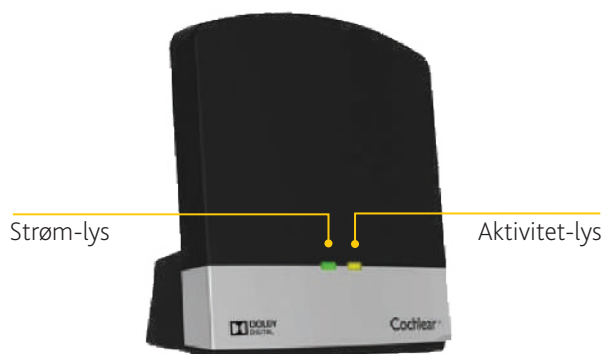

Komme i gang

Justere volumet

Slik gjør du det:

Bruk volumkontrollen på TV Streamer til å endre volum. Sørg for at lydprosessorer er justert til et komfortabelt nivå før du endrer innstillingene med volumkontrollen. I de fleste tilfeller trenger du bare utføre denne justeringen én gang, fordi TV Streamer lagrer det sist angitte volumnivået.

Mono/stereo-kontroll

Slik gjør du det:


Mono/stereo-bryteren med to posisjoner kan brukes til å angi stereo- eller monolydstreaming. For bilaterale forbindelser bør bryteren helst settes i Stereo-posisjonen. For unilaterale forbindelser bør den settes i Mono-posisjonen.

Kobling til lydprosessoren

- A** Plugg TV Streamer inn i veggen med strømledningen og mikro-USB-kontakten på TV Streamer.



- B** Sett lyd-kabelen inn i minijack-lydingangen på TV Streamer, og koble den til lyd-kilden.

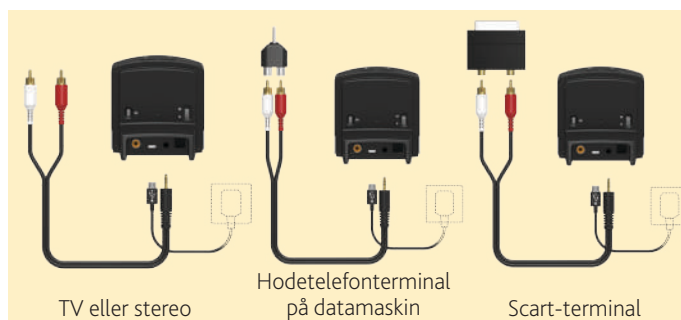

- C** Slå lydprosessoren(e) av.

Fjern lydprosessoren(e).
Slå **AV** lydprosessoren(e).

- D** Trykk én gang på tilkoblingsknappen på TV Streamer.



- E** TV Streamer er i tilkoblingsmodus.

Aktivitetsindikatoren blinker oransje, og du har 20 sekunder på deg til å koble til lydprosessoren.



- F** Slå på lydprosessoren mens tilkoblingsmodus er aktiv.

Slå lydprosessoren(e) **PÅ**.

En blå indikator  blinker en kort stund for å informere deg om at tilkoblingen lyktes.

Støtte

Du finner full informasjon om TV Streamer i brukerveiledningen som er pakket sammen med TV Streamer, og i brukerveiledningen for True Wireless-tilbehør.

Du finner full informasjon om lydprosessoren fra Cochlear i brukerveiledningen til denne.


Du finner mer støtte og videoer på Cochlears nettsted: www.cochlear.com

Bruke TV Streamer

Begynn å overføre lyd med lydprosessoren din

A Slå på lydprosessoren og TV Streamer.

Trykk på og hold inne knappen på lydprosessoren i to sekunder, og slipp.

Det blinker et blått lys  på lydprosessoren for å angi at streaming er aktiv.

MERK: På prosessorer med to knapper bruker du den øverste knappen.

B Slik velger du en annen kanal eller stopper overføring av lyd.

Gjenta trinn A én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Trykk lett på knappen på lydprosessoren for å stoppe streamingen.

Begynn å overføre lyd med Remote Assistant

Metode 1: Slå på lydprosessoren og TV Streamer. Slå på Remote Assistant.

Metode 2: Slå på lydprosessoren og TV Streamer. Slå på Remote Assistant.




Trykk på og hold inne telespoleknappen i 2 sekunder, og slipp.

Tips! Gjenta dette trinnet én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Lyden streames gjennom TV Streamer.

Du stopper streamingen ved å trykke kort på telespoleknappen.

ELLER

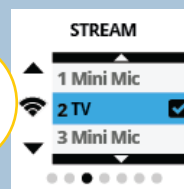

På Hjem-skjerm bildet trykker du på høyre pilknapp til du ser Stream-skjermen.

Bla nedover listen til kanalen du vil bruke, og trykk på OK.

Når lydenheten din er på, begynner lyden å streames gjennom TV Streamer.

Velg Av på Stream-valgskjerm bildet for å stoppe streamingen.

Begynn å overføre lyd med fjernkontrollen

Slå på lydprosessoren og TV Streamer. Slå på fjernkontrollen.

Begynn å overføre lyd med Nucleus Smart-appen

Slå på lydprosessoren og TV Streamer. Start Nucleus Smart-appen.




Trykk på og hold inne telespoleknappen i 2 sekunder, og slipp.

Når lydenheten din er på, begynner lyden å streames gjennom TV Streamer.

Gjenta dette trinnet én gang til for å velge kanal 2, og enda en gang for kanal 3.

Du stopper streamingen ved å trykke kort på telespole knappen.

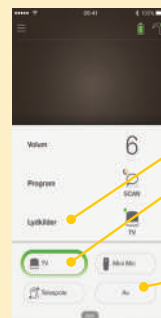

Trykk på Lydkilder.

Trykk på TV-ikonet.

Lyden overføres gjennom TV Streamer.

Hvis du vil stoppe overføring av lyd, trykker du på Av eller X-ikonet.

Cochlear True Wireless Accessories:

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel +46 31 792 44 00 Fax +46 31 792 46 95

Nucleus Sound Processor Systems:

 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

 Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, Kanso, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SoftWear, SPrint, True Wireless, den elliptiske logoen og Whisper er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix og WindShield er enten varemerker eller registrerte varemerker for Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2017